

DENTAPEN®



DENTALE LOKALANÄSTHESIE


Schmerzlos Kabellos Mühelos

FÜR IHRE PATIENTEN

“Das wichtigste Kriterium, bei der Auswahl eines Zahnarztes ist: Ein Zahnarzt, der schmerzlose Injektionen anbieten kann.”

How dentists are judged by patients, St Georges J, Dent Today, 2004.

Druck
(N/mm²)

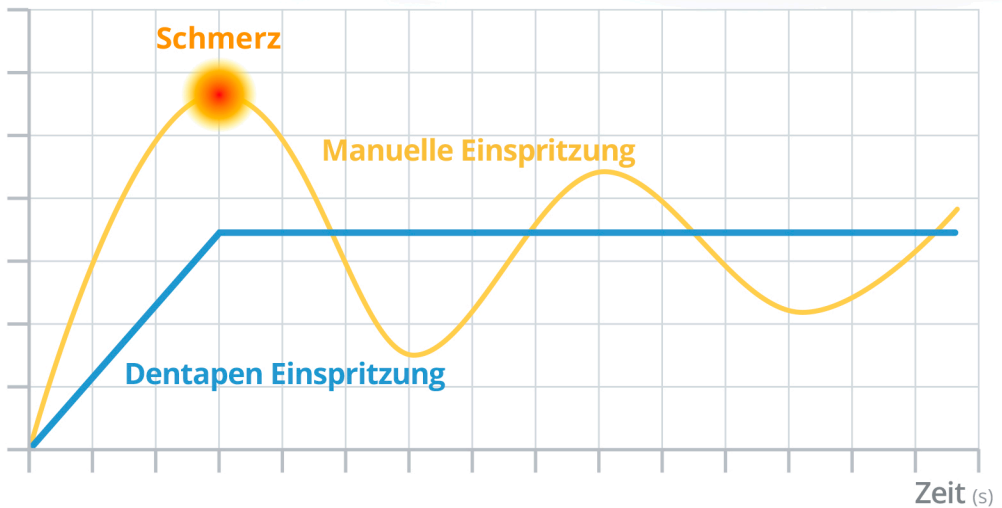

Kontrollierter
Druck

=

Erhöhte
Erfolgsrate

+

Reduzierte
Neben-
wirkungen

+

Minimierte
Betäubung

DENTAPEN®

DREHBAR
zur Erleichterung
der Nadelplatzierung



AUTOKLAVIERBAR
geringe Betriebskosten




BATTERIE
Bis zu 100 Patienten

2 JAHRE GARANTIE

Schutzhüllen verfügbar (Ref. PS01)

Das komplette Dentapen® System:

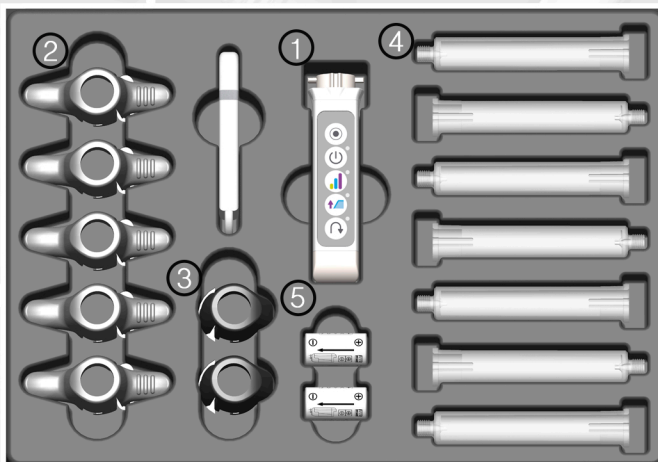

- ① Dentapen® x1
- ② Fingerauflage x5
- ③ Fingerauflage
Stiftform x2
- ④ Ampullenhalter
1.7ml x7
- ⑤ Batterie x3

Enthält:
25 Schutzhüllen

Für die EFFIZIENZ Entwickelt

- ✓ Autoklavierbares Zubehör
- ✓ Universell: alle Techniken
- ✓ Zwei-Wege Griff: Spritze- oder Stift- Griff
- ✓ Batteriebetrieben
- ✓ Kompakt und leicht: nur 50 Gramm
- ✓ Aktive Aspiration



Einfaches Einrichten

- Langsam 90 s/mL
- Mittel 60 s/mL
- Schnell 30 s/mL

- Intraligamentäre Anästhesietechnik (PDA)
- Progressive Geschwindigkeit



Zurückspulen in die Ausgangsposition

FÜR SIE

Spritzentechnologie für mühelose Anästhesie: computergesteuertes Lokalanästhesiegerät



Kontrollierte Anfangskraft und konstanter Fluss für sanftere Injektionen:
- Erhöht die Erfolgsrate der Anästhesie und spart Zeit



Computergesteuerter Drucksensor:
- Passt die Injektionsgeschwindigkeit druckabhängig an



Weitere Vorteile:
- Ermöglicht anspruchsvolle Injektionen: intraligamentär
- Führt Aspiration für ein sicheres Verfahren durch
- Verringert das Risiko von arbeitsbedingten Verletzungen: Tendinitis
- Beherrscht die Angst des Patienten



WENIGER



SCHMERZ



ANGST



BETÄUBUNG

GARANTIERT



KINDER-
FREUNDLICH



ZUFRIEDENE
PATIENTEN



KUNDEN-
TREUE



www.juvaplug.com

 @dentapen_injector

 Juvaplug

 Dentapen

R O B O T I C S Y R I N G E S

J U V A +

Entworfen und hergestellt in der Schweiz
Chemin Louis-Hubert 3, CH-1213 Petit-Lancy
info@juvaplus.com - Tel. +41 76 286 34 37