

DENTAPEN®



ANESTHÉSIE DENTAIRE


Sans douleur. Sans effort. Sans fil

POUR VOS PATIENTS

“Le critère numéro 1 dans le choix d’un dentiste est sa capacité à délivrer une anesthésie indolore.”

How dentists are judged by patients, St Georges J, Dent Today, 2004.

Pression
(N/mm²)

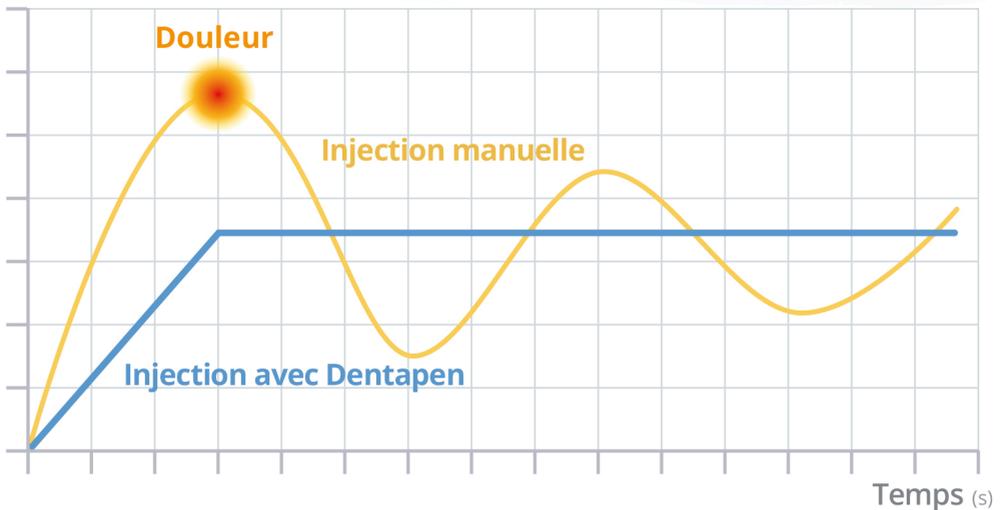

Pression contrôlée

=

Taux de succès élevé

+

Moins d'effets secondaires

+

Moins engourdi

DENTAPEN®

ROTATIF
Facilite le positionnement
du biseau



AUTOCLAVABLE
coûts d'exploitation faibles




BATTERIE
Jusqu'à 100 patients

GARANTIE 2 ANS

Housses de protection disponibles
(Ref. PS01)

Dentapen® kit complet:

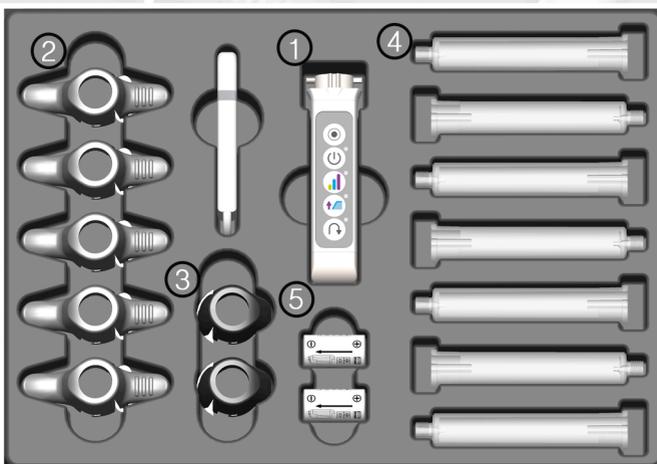

- ① Dentapen® x1
- ② Repose-doigt x5
- ③ Repose-doigt (prise stylo) x2
- ④ Porte-carpule 1.7ml x7
- ⑤ Batterie x3

Inclus:
Housses de protection

Simple et efficace

- ✓ Accessoires autoclavables
- ✓ Universel: permet toutes techniques d'anesthésies
- ✓ Prise en main: stylo ou seringue
- ✓ Alimenté par batterie
- ✓ Compact et léger: seulement 50 grammes
- ✓ Fonction d'aspiration active

TAILLE RÉELLE



Interface intuitive

-   Lent 90 s/mL
-  Moyen 60 s/mL
-  Rapide 30 s/mL

-   Anesthésie intraligamentaire
-  Vitesse progressive



Retour arrière (fin de procédure)

POUR VOUS

Technologie* de pointe pour une anesthésie dentaire sans effort

- ✓ Débit initial maîtrisé et flux continu pour des injections en douceur:
 - Augmente le taux de succès des anesthésies, gain de temps
- ✓ Mesure électronique de la pression:
 - Adapte la vitesse d'injection à la résistance des tissus
- ✓ Avantages supplémentaires:
 - Facilite les injections difficiles, p. ex. intraligamentaires
 - Permet l'aspiration pour une anesthésie en toute sécurité
 - Limite le risque de blessures au travail : tensions musculaires
 - Contribue à atténuer la peur du patient



MOINS



DOULEUR



PEUR



ENGOURDISSEMENT

PLUS



ADAPTÉ
AUX ENFANTS



PATIENTS
SATISFAITS



BOUCHE-
À-OREILLE



www.juvaplust.com

 @dentapen_injector

 Juvaplust

 Dentapen

ROBOTIC SYRINGES

J U V A +

Conçu et fabriqué en Suisse
Chemin Louis-Hubert 3, CH-1213 Petit-Lancy
info@juvaplus.com - Tel. +41 76 286 34 37